


Boubella

FerX-ELLA Stent Esofágico Boubella



Boubella

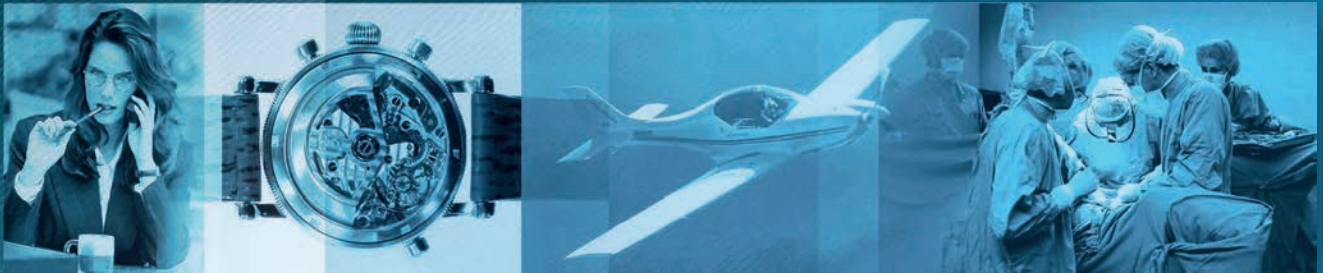

Sistema de entrega único

Excelente fuerza radial

Válvula antireflujo opcional

Excelente radiopacidad

Lazos de recuperación resistente a los ácidos



Descripción básica

FerX-ELLA Stent Esofágico - Boubella

Implantación de la endoprótesis bajo control radioscópico o endoscópico
Autoexpandible, totalmente cubiertos de acero inoxidable precargado en el sistema de entrega PULL

Indicaciones

La paliación de las estenosis esofágicas malignas
La oclusión de fístulas esofago respiratorias
Las estenosis benignas resistentes a la terapia estándar

Contraindicaciones

Las estenosis cerca del esfínter esofágico superior




Características y beneficios

- ☑ Punta de oliva divisible / desenganche automático, mientras que la liberación del stent se inicia / prevención de la trampa de oliva / fácil inserción y extracción segura del sistema de entrega
- ☑ Lazos de recuperación de aleación de grado médico en ambos extremos del stent / alta durabilidad mecánica y resistencia al ácido
- ☑ Excelente radiopacidad / visualización exacta y precisa del stent
- ☑ Segmentos contra la migración / reducción de las tasas de migración
- ☑ Alta fuerza radial / dilatación de estenosis y excelente resistencia a la compresión
- ☑ Excelente flexibilidad / alineamiento suave y adecuada expansión del stent a lo largo de las curvas anatómicas
- ☑ Recubrimiento del stent de polietileno / previene el crecimiento del tumor y la oclusión de fístulas esofago respiratorias / cubierta resistente a los ácidos para una implantación a largo plazo
- ☑ Válvula anti-reflujo / prevención del reflujo gastroesofágico y aspiración


Descripción adicional

5,9 mm / 9,4 mm (18 F / 28 F) sistema de entrega, disponible en una longitud estándar de 75 cm

Alambre guía recomendada: 0,035" (0,89 mm) ultra rígidas / longitud mínima de 220 cm

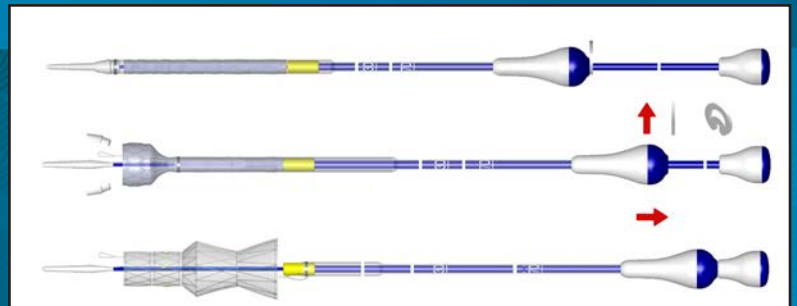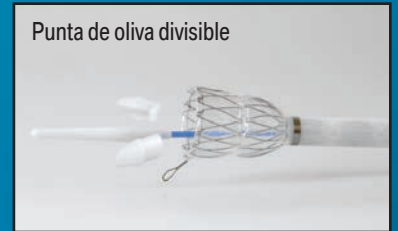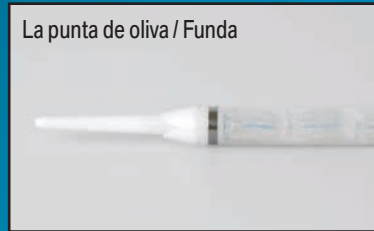

REF No.	Longitud completa del stent [mm]	Longitud activa del stent [mm]	Válvula anti-reflujo
014-01N-20-090-L	90	40	No
014-01N-20-105-L	105	55	No
014-01N-20-120-L	120	70	No
014-01N-20-135-L	135	85	No
014-01N-20-150-L	150	100	No
014-01N-20-165-L	165	115	No
014-01N-20-195-L	195	145	No
014-01N-20-210-L	210	160	No
014-02N-20-090-L	90	40	Sí
014-02N-20-105-L	105	55	Sí
014-02N-20-120-L	120	70	Sí
014-02N-20-135-L	135	85	Sí
014-02N-20-150-L	150	100	Sí
014-02N-20-165-L	165	115	Sí
014-02N-20-195-L	195	145	Sí
014-02N-20-210-L	210	160	Sí

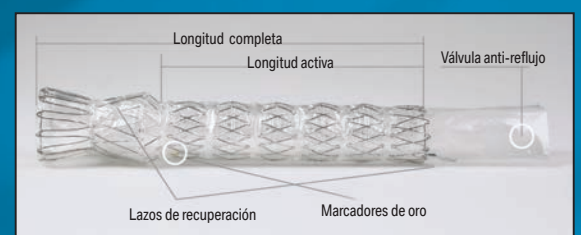

Distribuidor:

Manufacturer:

ELLA-CS, s.r.o.

Milady Horakove 504, 500 06 Hradec Kralove
Czech Republic

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu