



# Enterella

SX-ELLA Stent Pyloroduodenal Enterella

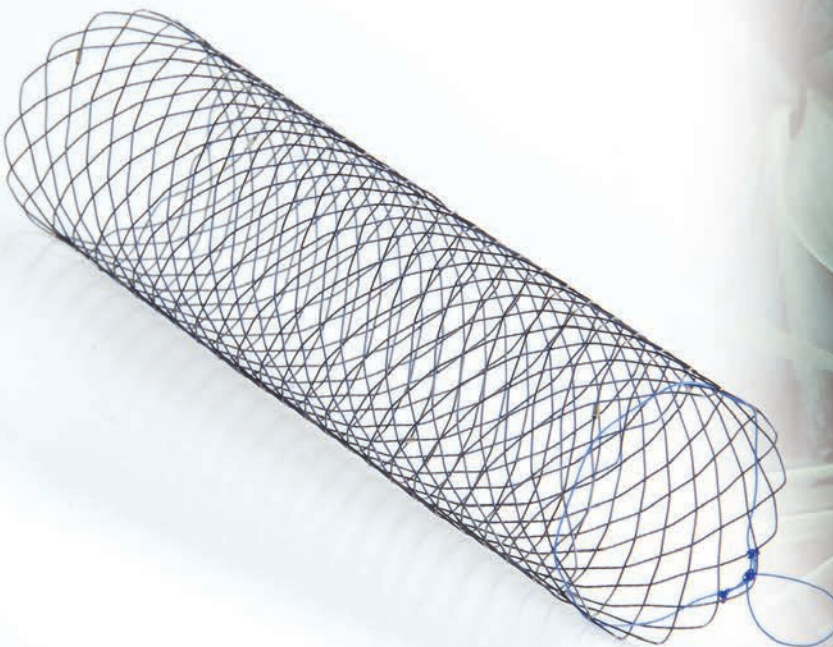

# Enterella

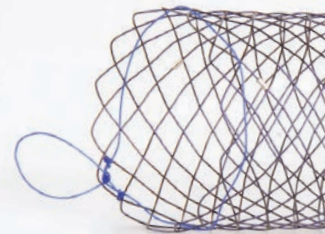

Fácil despliegue

Excelente flexibilidad

Extremos atraumáticos del stent

Suave alineación alrededor de las curvas



## Descripción básica

# SX-ELLA Stent Pyloroduodenal – Enterella

Implantación del stent bajo control fluoroscópico o endoscópico  
Stent auto-expandible de nitinol precargado en el sistema de entrega PULL

## Indicaciones

Para el tratamiento paliativo del síndrome del tracto de salida gástrico y para las estenosis y/u obstrucciones duodenales producidas por tumores malignos

## Contraindicaciones


Isquemia enteral  
Perforación del intestino  
Absceso peritoneal  
Ascitis severa  
Coagulopatía grave

## Características y beneficios


- ✓ Extremos atraumáticos del stent para la prevención eficaz de un traumatismo en el estómago / pared duodenal
- ✓ Excelente flexibilidad / alineación precisa en las curvas anatómicas
- ✓ Marcadores radiopacos en ambos extremos del stent y en el punto medio / mejor visibilidad, posicionamiento exacto del stent
- ✓ Lazo de plástico de reposicionamiento en el extremo proximal del stent / posibilidad de reposición dentro de los cinco días siguientes a la implantación

## Descripción adicional


10,5 F (3,5 mm) sistema de entrega disponible en una longitud estándar de 210 cm permitiendo el paso a través del canal de trabajo de un endoscopio Radiopaco, punta atraumática en el sistema de entrega  
Guía de cable recomendada: 0.035" (0,89 mm)

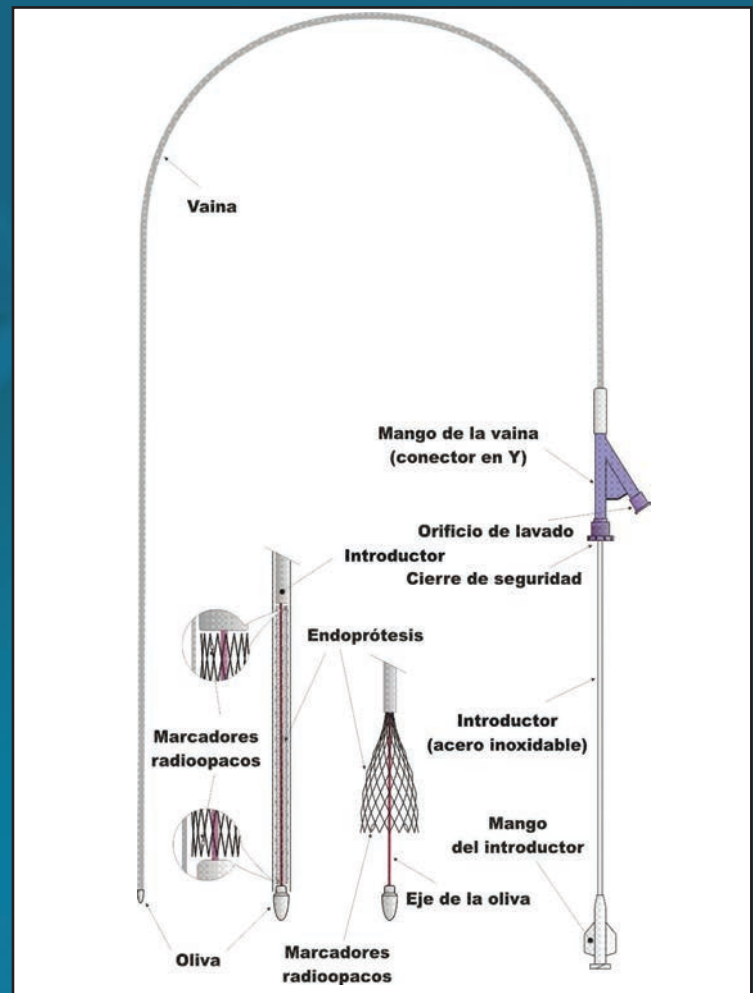


Marcadores radiopacos

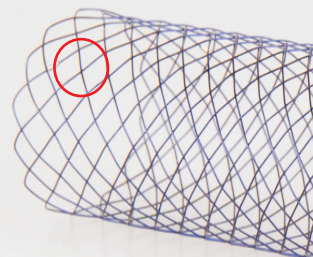


Lazo de plástico

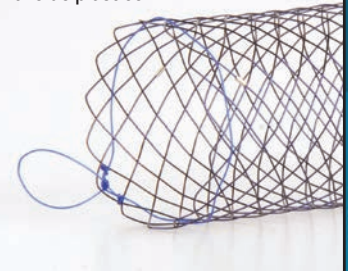

Bordes atraumáticos

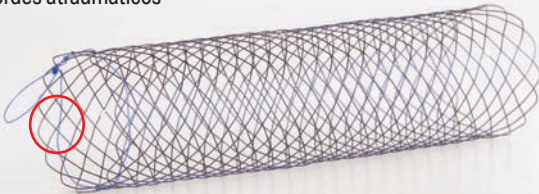

Fácil despliegue

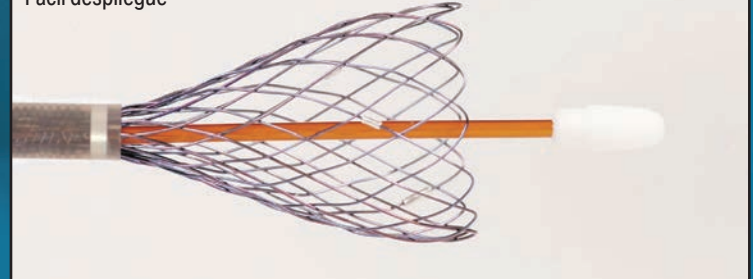

## Medidas disponibles

REF No.	Diámetro (sin comprimir) nominal [mm]	Longitud (sin comprimir) nominal [mm]
019-04-20-082	20	82
019-04-20-090	20	90
019-04-20-113	20	113
019-04-20-135	20	135
019-04-22-082	22	82
019-04-22-090	22	90
019-04-22-113	22	113
019-04-22-135	22	135
019-04-25-082	25	82
019-04-25-090	25	90
019-04-25-113	25	113
019-04-25-135	25	135

Distributor:

Manufacturer:

**ELLA-CS, s.r.o.**

Milady Horakove 504, 500 06 Hradec Kralove  
Czech Republic

Tel.: +420 495 279 111 Fax: +420 495 265 655  
E-mail: info@ellacs.eu URL: www.ellacs.eu